



**INTUBACJA JEST ŁATWA  
CHYBA, ŻE POJAWIĄ SIĘ TRUDNOŚCI**  
Wideolaryngoskop McGrath<sup>®</sup> MAC

**Medtronic**  
Further, Together

## ZMAKSYMALIZUJ SZANSĘ POWODZENIA ZA PIERWSZYM PODEJŚCIEM<sup>1</sup>

Przed przystąpieniem do intubacji przygotowujesz się na każdą sytuację.

Dzięki temu, kiedy pacjent znajduje się na stole i mijają te krytyczne chwile, jesteś lepiej przygotowany na wszystko.

Wideolaryngoskop McGRATH<sup>®</sup> MAC to pojedyncze, ręczne urządzenie, które łączy zalety:

- Laryngoskopii bezpośredniej (DL) – techniki znanej z laryngoskopu Macintosh
- Wideolaryngoskopii (VL) – technologii wideo

### WIDEOLARYNGOSKOP McGRATH<sup>®</sup> MAC

#### INTUICYJNY

Wykorzystuje standardową technikę DL połączoną z technologią VL

#### PRZYJAZNY DLA PACJENTA

Ułatwia dostęp do dróg oddechowych pacjenta dzięki wąskiej łyżce<sup>2</sup>

#### DAJĄCY PEWNOŚĆ


Zawiera akumulator zapewniający 250 minut pracy i wyświetlany na ekranie minutowy licznik stanu naładowania potwierdzający żywotność baterii


#### TRWAŁY

Odporny na upadki z wysokości dwóch metrów, wideolaryngoskop McGRATH<sup>®</sup> MAC dobrze znosi mało delikatną obsługę i działa niezawodnie w dynamicznym środowisku szpitala

#### ŁATWY W CZYSZCZENIU

Tworzy jałową całość z jednorazowymi łyżkami i może zostać zanurzony w całości; zarówno ekran, jak i rękojeść można poddawać dezynfekcji wysokiego stopnia

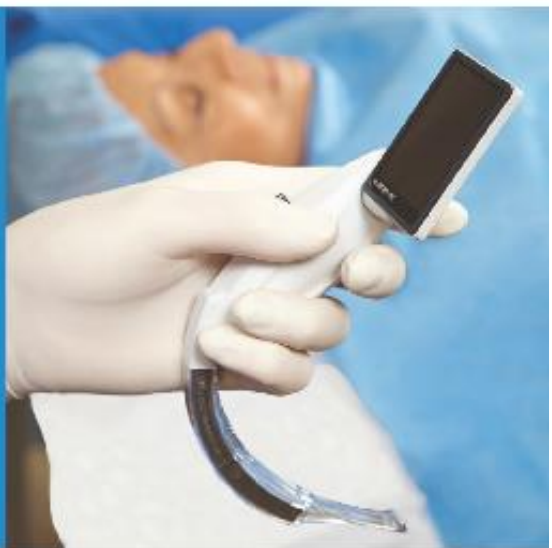

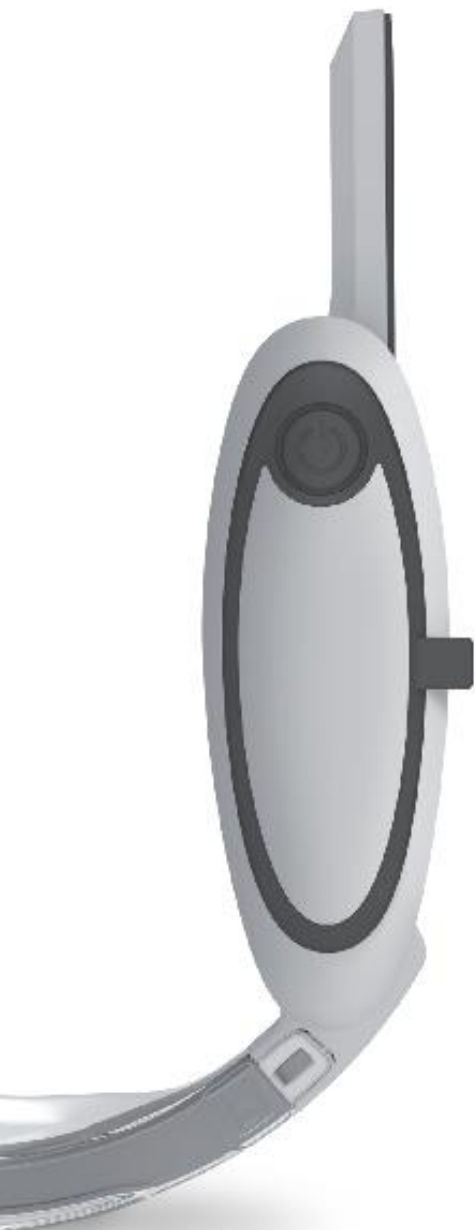

## INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ

SKU	OPIS	ROZMIAR	ILOŚĆ
300-000-000	Rękojeść McGRATH® MAC	Nie dotyczy	1
350-072-000	łyżka McGRATH® MAC rozmiar 1	1	50/op.
350-017-000	łyżka McGRATH® MAC rozmiar 2	2	50/op.
350-005-000	łyżka McGRATH® MAC rozmiar 3	3	50/op.
350-013-000	łyżka McGRATH® MAC rozmiar 4	4	50/op.
X3-003-000	łyżka McGRATH® MAC X rozmiar 3	3	10/op.
340-000-000	Akumulator (250 minut pracy)	Nie dotyczy	1

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

### Rękojeść McGRATH® MAC

Rozmiar: 180 mm x 68 mm x 110 mm

Waga: 200 g

Moc: Opatentowany akumulator litowy 3,6V (ok. 250 minut)

Źródło światła: LED wysokiej intensywności

Wyświetlacz: Kolorowy wyświetlacz LCD 2,5"

Kamera: CMOS

Materiały: Trwały materiał termoplastyczny o jakości medycznej ze wzmocnionym rdzeniem ze stopu strukturalnego. Urządzenie i opakowanie nie zawierają lateksu.

### Jednorazowe łyżki McGRATH® MAC

Materiał: Nieparujący polimer optyczny o jakości medycznej

Opakowanie: Produkt zapakowany jałowo, przeznaczony do jednorazowego użytku

**Prezentacje i pytania: skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem.**



1. Su YC, Chen CC, Lee YK, Lee JY, Lin KJ. Comparison of video laryngoscopes with direct laryngoscopy for tracheal intubation: a meta-analysis of randomised trials. *Eur J Anaesthesiol.* 2011;28 (11):788-795.
2. Levitan R, Heitz J, Sweeney M, Cooper R. The complexities of tracheal intubation with direct laryngoscopy and alternative intubation devices. *Ann Emerg Med.* 2011;57 (3):240-247.

©2013, 2015, Medtronic. Wszelkie prawa zastrzeżone. Medtronic, logo Medtronic i Further, Together są znakami towarowymi firmy Medtronic.™\* Marki niezależnych producentów są znakami towarowymi ich właścicieli. Wszelkie pozostałe marki stanowią znaki towarowe firmy Medtronic. 15-AW-0056